

INSTRUCTIE MATERIAALAFNAME

Triple Feces Test (TFT) op darmparasieten

BENODIGDHEDEN

TFT-set, bevat drie containers (potjes): twee potjes met vloeistof en één potje zonder vloeistof.

METHODE

In het deksel van elk potje is een schepje aangebracht om ontlasting in het potje te kunnen doen.

Vul op drie achtereenvolgende dagen, direct na ontlasting, het juiste potje met feces:

Dag 1 : Container nummer 1 (met vloeistof) vullen tot de rode pijl (zie afbeelding 1).

Dag 2 : Container nummer 2 (zonder vloeistof) vullen met drie flinke scheppen feces.


Dag 3 : Container nummer 3 (met vloeistof) vullen tot de rode pijl (zie afbeelding 1).

- Zichtbaar bloed op de ontlasting aanwezig? Vul op de eerste dag zowel potje 1 als potje 2. Vul de potjes met ontlasting inclusief bloed en slijm omdat daarin de parasieten kunnen zitten. Vul vervolgens op de tweede dag potje 3.
- Produceert u meerdere malen per dag ontlasting? Vul dan toch slechts één keer per dag een potje.
- Produceert u niet dagelijks ontlasting? Stuur de set pas in zodra u de drie potjes heeft kunnen vullen.

In sommige toiletten valt de ontlasting direct in het water. Dit maakt het verzamelen lastig en kan de opbrengst van het parasitologisch onderzoek verminderen. Door vóór ontlasting-productie enkele langere stukken toiletpapier op het wateroppervlak te laten vallen, wordt dit min of meer afgedekt. De ontlasting kan dan eenvoudig vanaf het papier worden geschept.

Noteer op elk potje naam, geboortedatum en de datum waarop het potje is gevuld.

Afbeelding 1

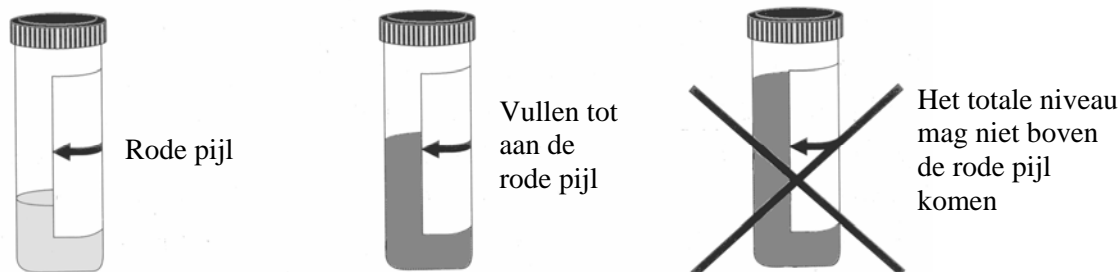

Voeg ontlasting toe aan een potje met vloeistof tot de totale inhoud de rode pijl bereikt. Draai het deksel stevig dicht en schud het potje daarna krachtig gedurende 20 seconden.

TRANSPORT EN BEWAARCONDITIES

Het afgenomen materiaal dient tezamen met het aanvraagformulier zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen 24 uur op het *Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten* (adres zie boven) te worden afgeleverd of per post te worden verstuurd naar Antwoordnummer 3003, 8000 WB Zwolle. Verpak het materiaal voor verzending per post met het lekdoekje in de bijbehorende transportblistert en plaats de blister in de safety bag. Verwijder de afdekstrip van de safety bag en sluit deze goed. Stop de safety bag samen met het aanvraagformulier in de blauwe verzendenvolp en rits dicht. Bewaar het materiaal tot transport bij kamertemperatuur.

VEILIGHEID

Potjes 1 en 3 bevatten SAF (natriumacetaat, azijnzuur, formaldehyde). Dit is niet drinkbaar. Als er toch van gedronken is, minstens twee bekert melk (laten) drinken en de huisarts waarschuwen. Huidcontact is niet schadelijk (gewoon met water afspoelen).

VRAGEN?

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten, tel: 038-4243111, www.isala.nl/lmmi.